


Manual de Usuário

Balança de Gordura Corporal

Modelo: EKXT-010B

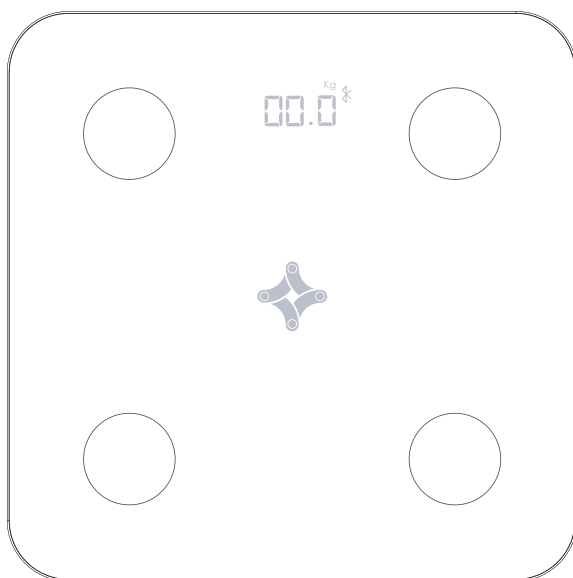

ANTES DE USAR A BALANÇA

Obrigado por adquirir a Balança de Gordura Corporal, por favor preencha para consultas futuras. Grampeie sua nota de compra aqui, e guarde este manual.

Nosso aplicativo permite que os usuários conectem facilmente seu dispositivo para facilitar o controle de saúde e peso. As medições são enviadas sem fio para o seu dispositivo móvel e podem ser visualizadas usando o aplicativo EKAZA

CONHEÇA SUA BALANÇA



Compatível
com App EKAZA



15 Indicadores
de Corporais



Relatório
de saúde



4 sensores
de precisão



5mm Vidro
Temperado




Multi-usuário




LED Oculto



Bluetooth

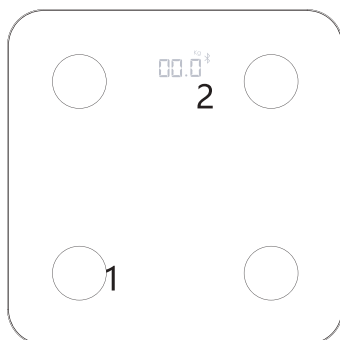

1. Eletrodos para os pés
2. LED oculto

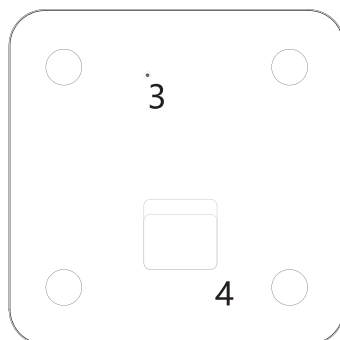

3. Botão de mudança da unidade
4. compartimento da pilha AAA

Sua Balança de Gordura Corporal vem com os seguintes componentes:

- Balança
- Manual de usuário
- 3x pilhas AAA

Leia todas as informações no manual de usuário e em qualquer outro documento contido na embalagem antes de usar a produto.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

SÍMBOLOS DE SEGURANÇA USADOS NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES



ADVERTÊNCIA: Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.



CUIDADO: Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados para o usuário ou paciente, ou danos ao equipamento ou outros bens.

OPERAÇÃO DO APARELHO




Não use esta balança se for usuário de marca-passo ou outro dispositivo médico implantado. A Balança de Controle Corporal transmite uma corrente elétrica extremamente fraca e imperceptível de 50 kHz e menos de 500 uA através do corpo do usuário durante a medição, para determinar a quantidade de tecido de gordura. O usuário não sente a corrente quando usa a balança.



Mulheres grávidas não devem usar este aparelho



Consulte seu médico ou serviço de saúde antes de iniciar uma dieta de emagrecimento ou um programa de exercícios.

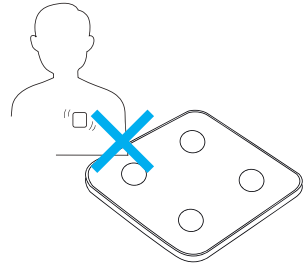

Pessoas com deficiência ou fisicamente frágeis devem ser assistidas por uma outra pessoa ao usar esta balança, ou usar um corrimão, andador ou outro dispositivo de suporte, para evitar cair ao piso dentro e fora da balança.



Leia todas as informações do manual de instruções e em qualquer outro documento contido na embalagem antes de usar a unidade.



Não use telefones móveis celulares, fornos de micro-ondas e outros dispositivos que geram fortes campos elétricos ou eletromagnéticos próximos à balança, Isso pode resultar em uma falha no funcionamento.



Não pise na borda ou na área de exibição da plataforma de medição. A balança pode tombar e causar lesão. E a medição poderá não ser correta.



Não pise na plataforma de medição quando o corpo ou os pés estiverem molhados, por exemplo, depois de tomar um banho ou ducha. Você pode escorregar e se lesionar.



Não coloque a balança em superfícies escorregadias, como pisos e azulejos ou pisos molhados. A balança pode se mover. Você pode perder o equilíbrio e cair.



Não pule na plataforma de medição. Você pode perder o equilíbrio e cair. A balança pode ser danificada.



Fique na plataforma de medição com os pés descalços. Tentar ficar na plataforma de medição usando meias pode fazer com que você escorregue e perca o equilíbrio.



Não insira as pilhas com as polaridades posicionadas incorretamente.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

OPERAÇÃO DO DISPOSITIVO

-  Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
-  Não use pilhas de tipos diferentes.
-  Substitua as pilhas usadas por novas imediatamente. Substitua as pilhas ao mesmo tempo.
-  Remova as pilhas se for guardar o aparelho por três meses ou mais.
-  Não exponha as pilhas a chamas ou fogo.
-  Se o fluido da pilha vazar e entrar em contato com sua pele ou roupa, enxágue imediatamente com bastante água. Entre em contato com um médico imediatamente no caso de contato com os olhos ou a pele.
-  O descarte do dispositivo, das pilhas, dos componentes e de acessórios opcionais deve ser feito de acordo com as regulamentações locais aplicáveis. O descarte ilegal pode causar poluição ambiental.
-  Opere a unidade unicamente para o fim para o qual foi desenvolvida. Não a use para nenhum outro propósito.
-  Este produto foi criado apenas para o uso doméstico. Este não deve ser usado para fins profissionais em hospitais ou outras instalações médicas. Este produto não satisfaz os requisitos exigidos para o uso profissional.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

-  O uso da unidade deve estar de acordo com as instruções fornecidas neste manual.
-  Não submeta a balança a choques fortes, como deixar a unidade cair.
-  Não mergulhe o dispositivo ou qualquer um de seus componentes na água.

INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL

O índice de Massa Corporal IMC (ou BMI) é um número calculado a partir do peso e da altura de uma pessoa. O IMC é um indicador confiável de gordura corporal para as pessoas. O IMC não mede a gordura corporal diretamente, mas as pesquisas mostram que o IMC se correlaciona com medidas diretas de gordura corporal. O IMC é usado como ferramenta de triagem, para identificar possíveis problemas de peso para adultos. O IMC é calculado usando a seguinte fórmula baseada em uma relação entre o peso e altura:

$$\text{IMC} = \text{Peso (Kg)} / \text{Altura (m)} / \text{Altura (m)}$$

índice de Massa Corporal (BMI)	IMC	Avaliação de IMC
Menos de 18,5	Abaixo do peso	7,0 - 10,7 10,8 - 14,5 14,6 - 18,4
18,5 ou mais e menos de 25	Normal	18,5 - 20,5 20,6 - 22,7 22,8 - 24,9
25 ou mais e menos de 30	Sobrepeso	25,0 - 26,5 26,6 - 28,2 28,3 - 29,9
30 ou mais	Obeso	30,0 - 34,9 35,0 - 39,9 40,0 - 90,0

GORDURA CORPORAL

A gordura corporal tem um papel vital no armazenamento de energia e proteção de órgão internos. Nós carregamos dois tipos de gordura em nosso corpo:


1) gordura essencial, que é armazenada em pequenas quantidades para proteger o corpo e 2) gordura armazenada, que é queimada para energia durante a atividade física. Embora a gordura corporal em excesso possa ser prejudicial, ter muito pouca gordura pode ser tão prejudicial quanto. Além disso, a distribuição da gordura corporal em homens e mulheres é diferente, então a base para a classificação do percentual de gordura corporal é diferente entre os sexos.

Sexo	Idade	Baixo	Normal	Alto	Muito alto
Feminino	20-39	< 21,0	21,0 - 32,9	33,0 - 38,9	≥ 39,0
	40-59	< 23,0	23,0 - 33,9	34,0 - 39,9	≥ 40,0
	60-79	< 24,0	24,0 - 32,9	36,0 - 41,9	≥ 42,0
Masculino	20-39	< 8,0	8,0 - 19,9	20,0 - 24,9	≥ 25,0
	40-59	< 11,0	11,0 - 21,9	22,0 - 27,9	≥ 28,0
	60-79	< 13,0	13,0 - 24,9	25,0 - 29,9	≥ 30,0

INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL

HORÁRIOS DE MEDIÇÃO RECOMENDADOS

Estar atento a ocasiões em que a sua porcentagem de gordura corporal se altera em seu próprio programa diário fará com que você conheça tendências mais exatas sobre a composição do seu corpo. Recomendase o uso desta escala diraiamente no mesmo ambiente e sob as mesmas circunstancias para cada medição.

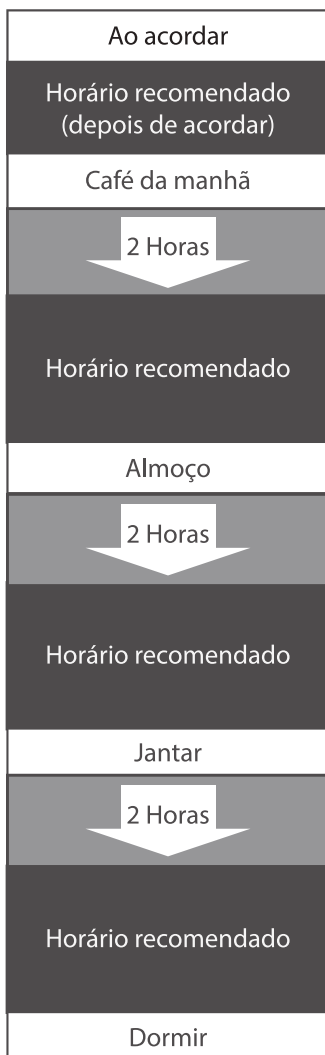

os resultados podem diferir da porcentagem de gordura corporal real. Existem certas condições em que podem ocorrer diferenças significativas entre a estimativa e os valores de gordura corporal reais. Essas diferenças podem estar relacionadas as taxas de mudança de fluidos corporais e/ou composição corporal.

INFORMAÇÕES DO PROTUDOS

ESPECIFICAÇÃO

Capacidade: 5kg -180kg

Divisão 100g

- Trabalha com o APP "EKAZA" e analisa mais de 13 valores de saúde corporal.
- Valores tradicionais: peso corporal / IMC / porcentagem de gordura corporal / conteúdo de água (porcentagem de água corporal) / volume muscular (porcentagem de água corporal) / metabolismo basal (KCAL) / massa óssea
- Novos valores: Escore Corporal / Peso Corporal do Desfibrilador / Grau de gordura visceral / Proteína / Forma corporal / Idade Física
- Linhas de tendências de curva para Peso / gordura corporal / IMC
- App suporta compartilhamento para vários usuários da família
- Auto ligado e desligado
- Indicador de bateria fraca e sobrecarga

Nota: A balança liga quando um peso de 5 kg ou mais é colocado sobre ela. Recomenda-se manter a balança em um ambiente de trabalho de: 0 °C - 40 °C ; Umidade relativa < 85%, para que os valores de saúde sejam atualizados continuamente.

APLICATIVO EKAZA

Pesquise e faça o download do aplicativo gratuito "EKAZA" no Android ou iOS.

Requisito do sistema para uso do aplicativo:

o iOS 8.0 ou superior + Bluetooth 4.0 ou superior

o Android 4.4 ou superior + Bluetooth 4.0 ou superior

Devido aos diversos fabricantes, modelos e versões de software de dispositivos, a funcionalidade total não pode ser garantida.

Por favor, leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de usar.

As balanças são projetadas apenas para uso doméstico, não para fins comerciais.

Para baixar o aplicativo, procure por "EKAZA" em qualquer loja de aplicativos. OU digitalize abaixo do código QR



OPERAÇÃO:

1. Abra o compartimento da bateria na parte inferior.
2. Insira as baterias, verifique se a polaridade está correta.
3. Feche o compartimento da bateria novamente.

Nota: Se a mensagem "LO" aparecer no visor, substitua as pilhas.

FAZER UMA MEDIÇÃO SEM APP

MEDIÇÃO SEM APP

Se você preferir não se conectar ao aplicativo e apenas desejar usar a balança para uma simples medição de peso, basta seguir as etapas abaixo:

1. Pressione o centro da plataforma e remova o pé.
2. 0.0 será exibido na tela
3. A balança será desligada e está pronta para uso.
4. Pise na plataforma de pesagem até que seus números de peso apareçam na tela.

Nota: Esse processo de inicialização deve ser repetido se a escala for movida. Sempre coloque a balança em uma superfície plana e rígida para obter medições precisas.

Se você encontrar uma discrepância de 3 kg duas vezes consecutivas, é possível que o processo de inicialização não tenha sido bem-sucedido. Repita as etapas 1 a 3.

FAZER UMA MEDIÇÃO COM APP


BAIXAR O APLICATIVO “EKAZA”

Para baixar o aplicativo, procure por "EKAZA" em Google Play Store ou App store.

REGISTRE SUA CONTA:

Se você ainda não tiver uma conta no aplicativo, poderá registrar uma conta ou fazer login por meio do código de verificação por SMS. Por favor, leia a página atual e a próxima página para a descrição do processo de registro.


Clique em "Criar nova conta", aceite os termos de política de privacidade do EKAZA App, clique em Concordar e insira o seu número ou e-mail.

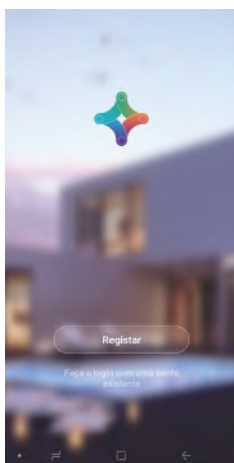


FAZER UMA MEDIÇÃO COM APP

ADICIONAR DISPOSITIVO:

1. Em “Minha página, clique em “Adicionar dispositivo” depois vá em “Saúde” e vá em “Balança de Gordura corporal”
2. Escolha “Confirm Indicator rapidly blink” para encontrar o dispositivo.
3. Pressione e segure o botão de mudança da unidade da base da balança até o visor frontal da balança aparecer símbolo “CLr” e parou em “0.0” com o símbolo Bluetooth piscando.

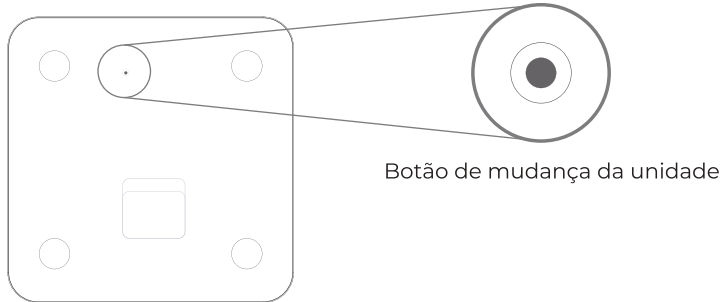

4. O aplicativo mostrará a escala Bluetooth do dispositivo disponível. Depois clique no botão "próximo" e a conexão será iniciada. Verifique se o celular Bluetooth está ativado.
5. Conexão 100% após alguns segundos / minutos. Em seguida, entre automaticamente na página "Adicionando dispositivo bem-sucedido", clique no botão "Concluído".

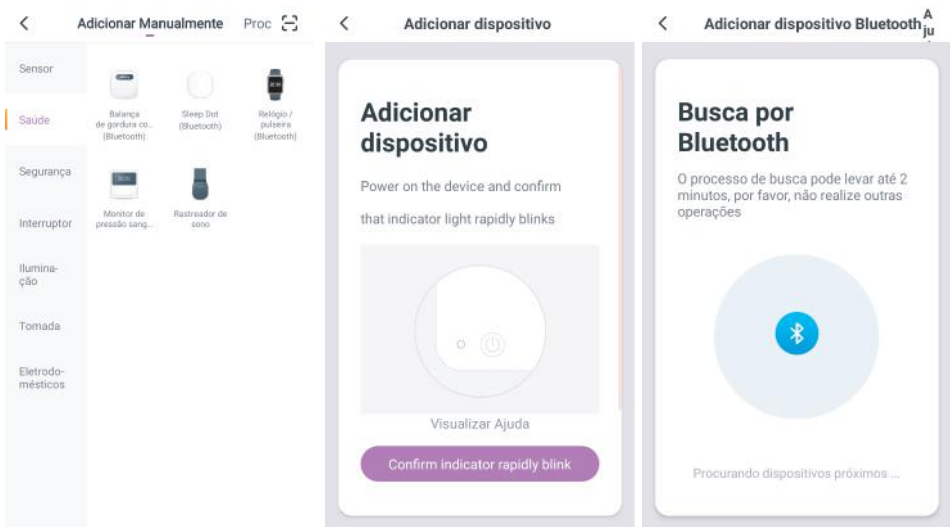

FAZER UMA MEDIÇÃO COM APP

ADICIONAR DISPOSITIVO:


6. Em seguida, entre automaticamente na página "Adicionar informações pessoais", preencha todas as informações e clique no botão "Salvar" no canto direito

Se você selecionar Ativado, o novo valor de medição será reivindicado automaticamente com base no peso +/- 2 kg para cada usuário.

Se você selecionar DESLIGADO, o novo valor de medição existirá na parte central da página principal, aguarde a sua Visualização e distribua manualmente a qual usuário.

É adequado para vários usuários no mesmo telefone e o peso de um membro da família é de +/- 2 kg próximo.

7. Entre na página principal do Balança de gordura corporal.

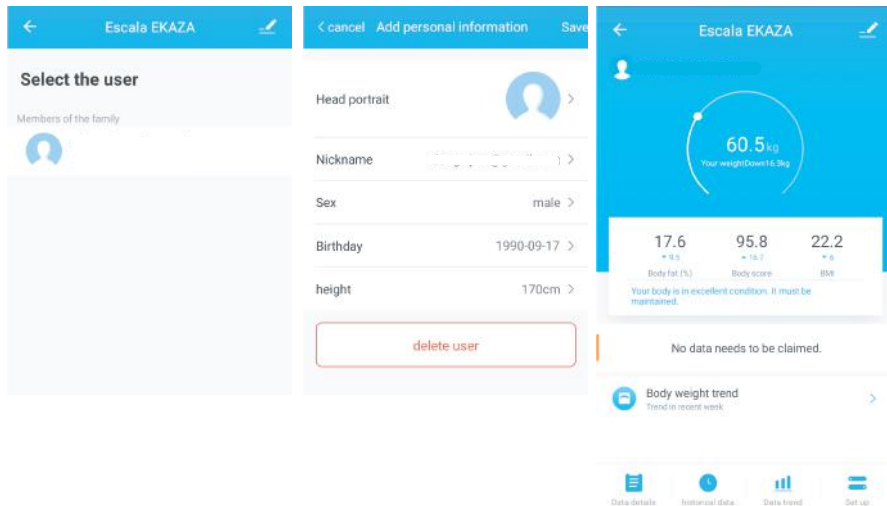

Comece a usar os valores de composição corporal da medida da escala.

8. Escale os pés na balança, toque os eletrodos se precisar iniciar sua medição.

Todos os valores de composição corporal serão exibidos no aplicativo.


Primeira utilização - os resultados da medição serão exibidos na linha do meio da tela.

8.1 Clique em "Ver" para visualizar a página de reivindicação de dados.

FAZER UMA MEDIÇÃO COM APP

MULT-UÁRIOS NO MESMO APP

Adicionar novos usuários – os outros membros – perfil de usuário. Clique no ícone do usuário principal do canto esquerdo para adicionar novos usuários pelos outros membros. Conclua a entrada de dados do usuário e salve.

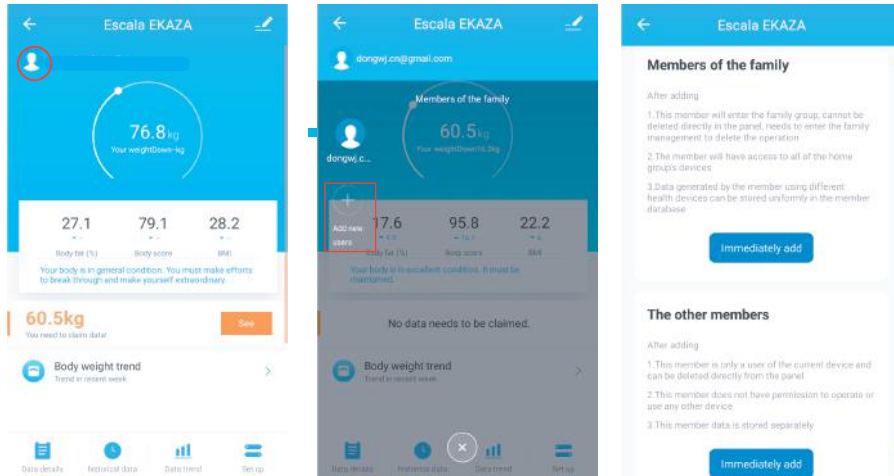

2. Os dados dos valores corporativos serão reivindicados automaticamente para cada usuário com base na seleção de peso +/- 2kg semelhante à etapa 9.0 definir Nova distribuição de medidas como LIGADA.

Nota: Se você não encontrou valores na página principal, preste atenção no meio "Você precisa reivindicar dados" - Exibir - Distribuição.

Se os usuários usam perto de +/- 2 kg de peso, sugira a etapa 9.0 desativada. Medições reivindicadas manualmente.

FAZER UMA MEDIÇÃO COM APP

COMPARTILHAR DISPOSITIVOS

Permitir que outros telefones possam conectar minha balança inteligente:

1. Clique  na página principal da balança, entre em Detalhes da página do dispositivo.
2. Escolha "Compartilhar dispositivos" - preencha o número de telefone do membro da família que você deseja convidar será uma notificação para o host do número.

Nota: se o usuário convidado já tiver uma conta, o dispositivo Smart Scale será exibido automaticamente em seu telefone. Em seguida, capaz de usar a balança com o aplicativo.

Se o usuário convidado ainda não tiver registrado uma conta, deve terminar o registro primeiro.



Importante: Suporte apenas um host principal de escala inteligente. Outros subusuários apenas podem ser convidados por dispositivo compartilhado (iphone diferente) ou adicionar usuários (mesmo celular). Não é possível emparelhar diretamente a balança com o segundo telefone adicionando a etapa 1/2/3/4/5 do dispositivo, caso contrário, o host inicial da balança inteligente perderá a conexão.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS

Se você deseja emparelhar outro dispositivo, exclua o dispositivo atualmente conectado primeiro, clique EDITAR , entrar nos detalhes da página e selecione "Remover dispositivo".

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. Quando a tela LCD exibir "LO", você deverá instalar uma nova bateria.
2. Quando o LCD exibir "ERR" e permanecer em "ERR" o indica que o peso máximo foi excedido.
3. Quando o LCD exibe Peso, mas não analisa dados no aplicativo ou exibe "ERR2"
 - o certifique-se de estar descalço quando estiver na plataforma
 - o verifique se o pé está tocando os eletrodos no lado direito e esquerdo
 - o certifique-se de inserir os parâmetros do seu perfil na íntegra
 - o Verifique se a página WELCOME HOME mostra que a balança está conectada
 - o verifique se os eletrodos da balança estão em boas condições.

Nota 1: Se o procedimento acima não resolveu o problema, entre no dispositivo Remover dispositivo e primeiro repita as etapas de 1 a 5 para adicionar dispositivo para emparelhar o dispositivo.

4. por que não consigo ver minhas medidas depois de criar um novo perfil de usuário?

Se a função de distribuição automática estiver ativada e o novo usuário com peso de +/- 2 kg estiver próximo ao usuário principal, a medição será reivindicada para o usuário principal. Sugira definir OFF para a função de distribuição automática neste caso.

BATERIA

1. Retirar a tampa da bateria na parte inferior da balança, soltando o clipe e levantando a tampa.
2. Remova a bateria usada e substitua por uma nova.
3. Volte a colocar a tampa da bateria.
 - Use as pilhas recomendadas
 - Verifique se o compartimento da bateria está seguro
 - Coloque as pilhas corretamente, observando as marcas de mais e menos na bateria e no compartimento.
 - Guarde as baterias não usadas na embalagem e mantenha-as afastadas de objetos metálicos que possam causar um curto-circuito
 - Remova as pilhas gastas da balança.
 - Remova as pilhas da balança se elas não forem usadas por um período prolongado.
 - Mantenha as pilhas soltas longe de crianças pequenas.
 - Procure assistência médica se a bateria for engolida.

GARANTIA

Sua escala de gordura corporal bluetooth EKAZA, com exceção das pilhas, é garantida com livre de defeitos de materiais e de mão de obra que venham a surgir dentro de 1 ano a partir da data da compra, quando usada de acordo com as instruções fornecidas com este dispositivo. A garantia é invalidada quando os defeitos/danos forem decorrentes de mau uso ou vazamento de pilhas. A garantia acima se aplica apenas ao consumidor final, que adquire o produto no varejo.

O conserto ou a substituição do dispositivo coberto pela garantia descrita acima serão realizados sem custos, se assim for decidido pelo Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA. O conserto ou a substituição são nossa responsabilidade e única solução prevista conforme a garantia acima.

Utilize somente peças específicas, fornecidas pela Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA neste produto. O uso de outras peças que não sejam fornecidas pela Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA poderão comprometer seu funcionamento ou até mesmo causar danos ao aparelho. Possíveis danos causados em decorrência do uso de peças inadequadas serão de responsabilidade do consumidor e a cobertura pela garantia do produto poderá não ser aplicada.

Siga sempre as orientações do uso, limpeza e armazenamento descritas neste manual. Caso seja constatado o uso em desacordo com as orientações deste manual, a cobertura pela garantia do produto poderá não ser aplicada.

ESTE DOCUMENTO É A ÚNICA GARANTIA FORNECIDA PELA EASTERN KEYSTONE ELETRÔNICO E SEGURANÇA LTDA, EM CONJUNTO COM ESTE DISPOSITIVO, E A EASTERN KEYSTONE ELETRÔNICO E SEGURANÇA LTDA SE DECLARA ISENTA DE QUALQUER OUTRA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO PARA FINS DETERMINADOS. AS GARANTIAS IMPLÍCITAS E OUTROS TERMOS QUE POSSAM SER IMPOSTOS POR LEI, SE HOUVER, SÃO LIMITADOS AO TÉRMINO DO PERÍODO DE GARANTIA EXPRESSO A CIMA.

A GARANTIA ACIMA É COMPLETA E EXCLUSIVA. O GARANTIDOR EXIME-SE EXPRESAMENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS CASUAIS, ESPECIAIS OU DECORRENTES DE QUALQUER NATUREZA.

Nome:

Endereço:

Endereço de compra:

Data de compra:

Número de série do produto:

Problema de falha:

.....



OBSERVAÇÕES

Importado e distribuido no Brasil por:
EASTERN KEYSTONE ELETRÔNICO E SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 31.205.535/0001-22
SAC: 0800-988-5558
sac@ekstech.com.br
Validade: Ineteminada.

Fabricado na China.